

T-EDGE Gamme 10|11

Tellement plus
qu'un simple autoclave



Ayez l'esprit tranquille avec T-Edge, votre autoclave de classe B

La stérilisation en un clic

Sélectionnez simplement le programme souhaité et appuyez sur « Démarrer ».
Je m'occupe de tout le reste. C'est ce que j'appelle le « Click and Go ».



L'autoclave de stérilisation totalement
automatique du début à la fin

Tellement plus qu'un simple autoclave

- ◆ Conformité aux normes internationales les plus strictes
- ◆ Capacités de stérilisation vérifiées en milieu clinique
- ◆ Écran tactile haute résolution
- ◆ Technologie innovante
- ◆ Interface simple à utiliser
- ◆ Conception élégante
- ◆ Excellente expérience utilisateur



Laissez-moi m'occuper de la stérilisation pendant
que vous vous occupez de vos patients !

Efficacité maximale

Réduire les coûts



Fiabilité et assistance

- ◆ Fabrication de qualité supérieure pour des cycles répétables



Sécurité et traçabilité

- ◆ Des normes de sécurité très strictes, y compris une technologie de traçabilité qui contrôle tous les paramètres du processus.



Technologie avancée

- ◆ Une technologie de pointe, un large éventail d'applications, pour une facilité d'utilisation.



Flexibilité

- ◆ Utilise un réservoir d'eau intégré, ce qui permet à l'autoclave d'être complètement indépendant de l'emplacement et simple à installer.



Performance

- ◆ Durées de cycle efficaces




Je suis si compact et si élégant, vous pouvez m'exposer n'importe où



Capacité de chambre optimale

Conçu pour utiliser plus de 75 % de la capacité de la chambre, avec 5 plateaux extra-longs

- ◆ T-Edge 10 - 3 cassettes dentaires plein format (1 DIN) + 3 cassettes dentaires demi-format (1/2 DIN)
- ◆ T-Edge 11 - 4 cassettes dentaires plein format (1 DIN) + 4 cassettes dentaires demi-format (1/2 DIN)

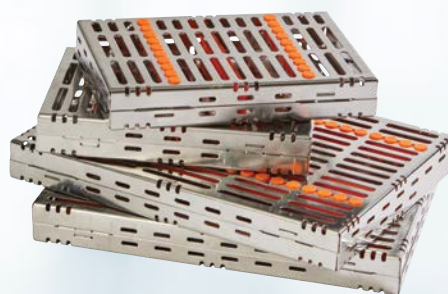

Compact et élégant

- ◆ Conçu pour s'adapter aux étagères ou aux comptoirs de 60 cm
- ◆ S'adapte confortablement aux petits espaces

Accessible et ergonomique

- ◆ Chargement pratique et facile grâce à l'ouverture de la porte à 110°
- ◆ Diverses possibilités de remplissage et d'évacuation de l'eau : par le haut, par l'avant ou automatique

Données et Connectivité



Données et connectivité

- ◆ Mémoire interne : stockage jusqu'à 1 000 cycles
- ◆ Transfert de données vers un PC ou un réseau via une connexion Ethernet ou un port USB
- ◆ Connexion Wi-Fi intégrée




Contrôle en temps réel par le biais d'un téléphone intelligent



Amélioration de la facilité d'entretien



- ◆ Système d'exploitation sophistiqué permettant de détecter rapidement les défaillances
- ◆ Chaque pièce peut être facilement démontée et réparée/remplacée séparément

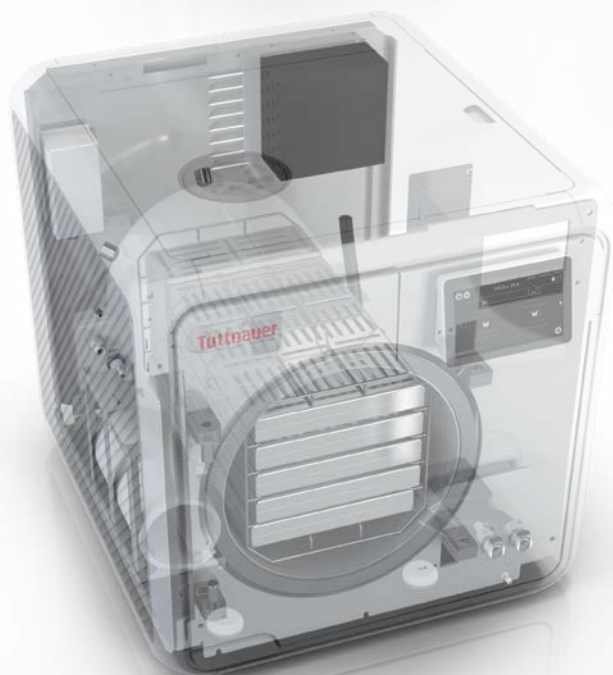

Écologique

- ◆ Réduction de la consommation d'eau d'environ 40 %
- ◆ Diminution de la consommation d'énergie grâce à la réduction de la durée du cycle
- ◆ Réduction des coûts d'électricité grâce à des réglages de temporisation permettant à la machine de fonctionner en dehors des heures de travail

Documentation et traçabilité



1. Placez la pochette dans la chambre.



4. Appliquez l'étiquette du code-barres sur chaque pochette.



2. Terminez le processus de stérilisation.



- * Scannez les données du code-barres pour le dossier du patient pendant le traitement, à des fins de sécurité et de réglementation.



3. Recevez les codes-barres contenant les données de stérilisation (y compris la date d'expiration).



Stérilisation terminée

T-Edge est conforme aux **normes internationales les plus strictes :**

Système de gestion de la qualité :

- ◆ ISO 13485
- ◆ Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Tests fonctionnels de vérification et de validation :

- ◆ EN 13060, ANSI/AAMI ST55

Voie de certification de la chambre pressurisée :

- ◆ ASME Code section I et section VIII. Div.I, PED 2014/68/UE

Validation du logiciel :

- ◆ EN 62304, directives de la FDA

Sécurité électrique :

- ◆ EN/IEC 61010-2-40, IEC 61010-1


Tests d'utilisabilité :

(Expérience de l'utilisateur, Ingénierie des facteurs humains)

- ◆ IEC 62366-1

Compatibilité électromagnétique :

- ◆ EN 61326-1

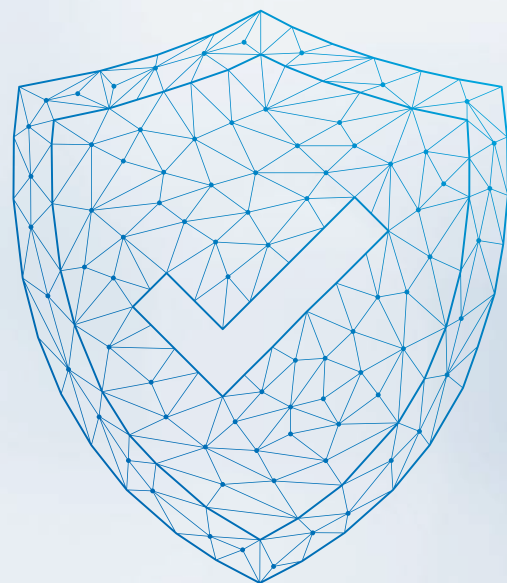

Programmes de stérilisation

Icône	Nom du programme	Durée de stérilisation	Type de charge	Type d'utilisation
	Non emballés 134 °C	4 mins	Charge solide / poreuse	Pour une utilisation immédiate
	Emballés 134 °C	4 mins		Pour stockage
	Non emballés 121 °C	20 mins		Pour une utilisation immédiate
	Emballés 121 °C	20 mins		Pour stockage
	Prion 134 ° C	18 mins		Pour stockage
Cycles de test	Test de Bowie et Dick/Helix/ de vide	Indicateur chimique dans un dispositif d'épreuve du produit Tests périodiques tels que mentionnés dans la norme ISO 17665-1		

Caractéristiques techniques

	T-EDGE10	T-EDGE11
Dim chambre ø x L (mm)	250 x 460	280 x 460
Volume de la chambre	23 litres	27,2 litres
Dimensions extérieures	480 (P) x 500 (L) x 580 (H) mm	500 (P) x 500 (L) x 580 (H) mm
Dimensions du plateau	189 (P) x 20,5 (L) x 421 (H) mm	207 (P) x 20,5 (L) x 421 (H) mm
Poids	53 kg	56 kg
Alimentation	50/60Hz, 230V-1Ph+N+GND	50/60Hz, 230V-1Ph+N+GND
Nombre de plateaux	5	5
Connexions	1 port Ethernet, 2 ports USB, WI-FI, raccordement intégré pour le remplissage et l'évacuation automatiques de l'eau	
Articles fournis	Tuyau d'évacuation	Tuyau d'évacuation





Des leaders mondiaux renommés
dans les solutions de contrôle
de l'infection, possédant plus de

95 années
d'expérience

Des produits distribués dans les
cabinets médicaux, hôpitaux et
instituts de recherche de plus de

140
pays

TUTTNAUER, VOTRE GUICHET UNIQUE POUR TOUS VOS BESOINS DE CONTRÔLE DES INFECTIONS.

Laissez-moi vous présenter notre gamme complémentaire de produits pour
un processus de stérilisation complet.



Thermo-
soudeuse



Laveur TIVA2



Distillateur



Bac à ultrasons



Nettoyage
du système

Ventes et marketing international

E-mail : info@tuttnauer.com

www.tuttnauer.com

Tuttnauer Europe b.v.

Hoeksteen 11, 4815 PR
BP 7191, 4800 GD Breda
Pays-Bas
Tél : +31 765 423 510
Fax : +31 765 423 540
E-mail : info@tuttnauer.nl

Distribué par :



Apprenez de nos experts

Consultez notre blog
tuttnauer.com/blog

