

Tuttnauer Clínica

LÍDERES EN
ESTERILIZACIÓN
DESDE

1925

T-Top Autoclave

Eficiencia con la máxima fiabilidad

Incluye el único *software* IoT diseñado para clínicas inteligentes, que conecta dispositivos de esterilización y se comunica *in situ* o a distancia.



Diseñado para satisfacer las necesidades cotidianas de esterilización de su clínica médica

Asequible y fiable para la esterilización de clínicas médicas

Autoclave médico de sobremesa de clase B del principal fabricante del mundo

 Eficiente

 Rendimiento fiable

 Plug and Play

 Interfaz de usuario exclusiva

El **T-Top** es un autoclave de sobremesa de 21 litros desarrollado específicamente para clínicas médicas y dentales de tamaño pequeño y mediano. Diseñado con el foco puesto en la simplicidad y la economía, este autoclave de sobremesa cubre las necesidades básicas de esterilización general de su clínica con objeto de aumentar la productividad de su consulta.

El **T-Top** pone a su disposición la capacidad universal con una solución asequible en la que puede confiar para la gestión de la carga de trabajo diaria del proceso de esterilización.

El **T-Top** equilibra a la perfección rendimiento, ergonomía, tecnología y usabilidad. El resultado es un autoclave robusto y eficiente que satisface a la perfección los requisitos de las prácticas habituales.



Esterilizador de alto rendimiento

Solución completa para el reprocesamiento de instrumental clínico. **Hace el proceso más fácil, seguro y asequible.**

Tecnología avanzada y fácil de usar con conectividad Wi-Fi y pantallas táctiles de color intuitivas.



Plug and Play

No requiere conexiones de instalación especiales, solo una fuente de alimentación

- ◆ Pantalla táctil multicolor fácil de usar con iconos intuitivos
- ◆ Programas de fácil inicio y ejecución
- ◆ Compacto y ergonómico, diseñado para ajustarse a su espacio



Rendimiento fiable

Producto de calidad que hace todo lo que se necesita y se espera de él

- ◆ Fácil de manejar, mantener y usar
- ◆ Memoria interna: almacena hasta 500 ciclos
- ◆ Tecnología avanzada que proporciona longevidad y fiabilidad



Seguridad y normativas

Cumple los más estrictos estándares internacionales.



Trazabilidad y conectividad

Tecnología avanzada que proporciona inteligencia de datos en tiempo real

- ◆ 2 puertos USB
- ◆ Conexión Wi-Fi y *software* T-Connect
- ◆ Supervisión de los dispositivos a distancia y descarga de datos
- ◆ Acceso a distancia al historial de ciclos y recepción de notificaciones y alertas.
- ◆ Los técnicos y centros de servicio pueden analizar a distancia los autoclaves y diagnosticar y resolver problemas
- ◆ Documentación sin papel
- ◆ R.P.C.R



Innovación La mejor tecnología

- ◆ Funciones de programación y personalización
- ◆ Interfaz de usuario especialmente diseñada para acelerar y optimizar la carga diaria de trabajo
- ◆ Ajuste de ahorro de tiempo para configurar el inicio de ciclos de prueba y esterilización a cualquier hora

Diseñado para la facilidad de uso

Un combinación perfecta de rendimiento y funcionalidad para **una experiencia de usuario intuitiva y sin complicaciones.**

Esterilización con el clic de un botón

Simplemente seleccione el programa requerido y pulse «inicio»; una funcionalidad sencilla que acelera y optimiza la carga de trabajo de reprocesamiento de instrumental.



T-Top simplifica su proceso de esterilización



Documentación y trazabilidad



- ◆ Opciones avanzadas de documentación y trazabilidad, incluido un código de barras
- ◆ Nombre y contraseña de usuario personalizados

Impresión para guardar copias en papel (impresora opcional)

Capacidades sofisticadas de análisis de datos con el *software* RPCR

Software sin papel basado en la nube

Los dispositivos T-Top incorporan la exclusiva y tecnológicamente avanzada T-Connect, una solución IoT basada en la nube para su central de esterilización.

Redefinición de centrales de esterilización y clínicas inteligentes

T-Connect es una solución IoT basada en la nube diseñada para su central de esterilización. El *software* proporciona a las clínicas inteligencia de datos en tiempo real, accesible desde cualquier lugar, en cualquier momento y de forma segura.

Conecte autoclaves, lavadoras y otros dispositivos con Wi-Fi o pasarela T-Connect y use el avanzado *software* de T-Connect para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y los resultados.


Saque partido de la documentación sin papel, el diagnóstico de dispositivos y la supervisión y solución de problemas. Saber dónde y cuáles son los fallos técnicos le permite disponer de un servicio técnico en menos tiempo, minimizando el tiempo de inactividad de sus dispositivos.

¿Por qué usar T-Connect?

Ofrece la posibilidad de conectar dispositivos en su central de esterilización y comunicarse *in situ* o a distancia. Al usar la solución de pasarela T-Connect, se conectará a cualquier dispositivo que no tenga Wi-Fi.



¿Qué hace T-Connect?

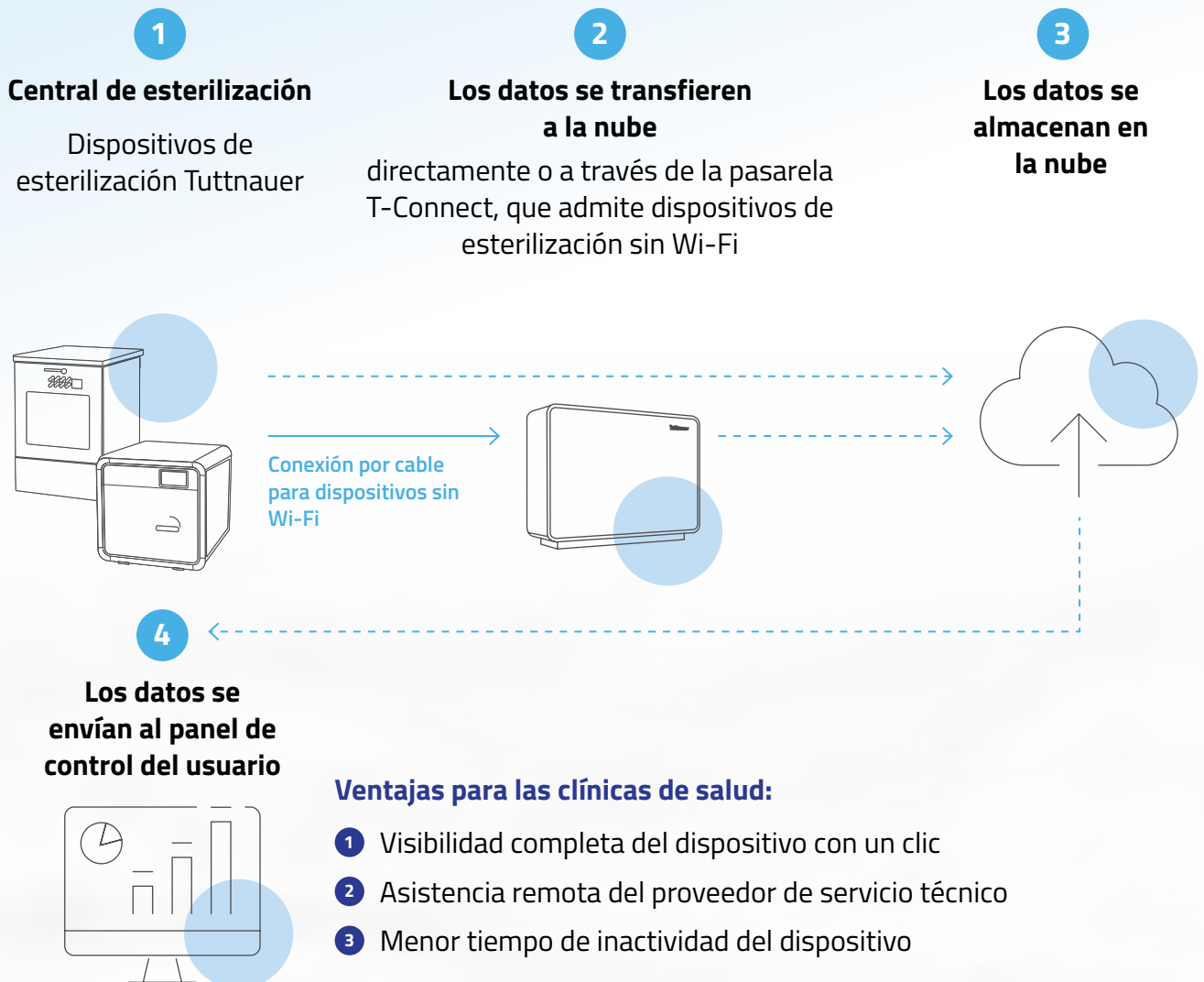






Conéctese al futuro de la esterilización con T-Connect

- ◆ Conectividad mediante PC, tableta y smartphone
- ◆ Acceso y descarga a distancia del historial de ciclos y recepción de notificaciones y alertas
- ◆ Los técnicos y centros de servicio pueden analizar a distancia los autoclaves, diagnosticar y resolver problemas
- ◆ Sugerencias para resolver el problema (vídeo/instrucciones)
- ◆ Notificación automática para reponer consumibles, diagnóstico a distancia
- ◆ Los datos están seguros
- ◆ Fácil de usar

T-Top

Programas de ciclos de esterilización

Icono	Nombre del programa	Tiempo de esterilización	Tipo de carga	Tipo de uso
	Sin envoltorio 134 °C	4 min		Para uso inmediato
	Con envoltorio 134 °C	4 min		Para almacenamiento
	Sin envoltorio 121 °C	20 min	Carga sólida/porosa	Para uso inmediato
	Con envoltorio 121 °C	20 min		Para almacenamiento
	Prión 134 °C	18 min		Para almacenamiento
Ciclos de prueba	Pruebas Bowie-Dick/Helix/ de vacío	Indicador químico de un dispositivo de prueba de productos Pruebas periódicas conforme a ISO 17665-1		

T-Top

Especificaciones técnicas

	T-Top 10"
Tamaño de la cámara	249 (Ø) x 450 (pr.) mm
Volumen	21 l
Espacio útil de la cámara	75 % (~17 l)
Dimensiones generales	585 (pr.) x 462 (an.) x 460 (al.) mm
N.º máx. de bandejas	5
Dimensiones de la bandeja	375 (pr.) x 185 (n.) x 15 (al.) mm
Peso	45 kg
Conexiones	2 puertos USB, Wi-Fi
Rellenado de agua	manual

Consumibles de esterilización y desinfección

Tuttnauer ofrece una amplia variedad de indicadores de apoyo para su proceso de esterilización y desinfección. Dentro de nuestra amplia gama de productos, **tenemos el indicador biológico más rápido y asequible, que proporciona una respuesta en 20 minutos.**

Indicadores biológicos



VAPOR
WTL198-0072



VAPOR
WTL198-0058



VAPOR
WTL198-0067



INCUBADORA DE
FLUORESCENCIA
WTL198-0057



VAPOR
WTL198-0056



INCUBADORA
PLZ198-0005

Superlectura ultrarrápida de fluorescencia

Lectura convencional en 24 horas

Indicadores químicos



WTL198-0053

Cinta indicadora
de vapor



WTL198-0055

Indicador de vapor



WTL198-0068

Indicador de vapor



WTL 198-0062 (18 min)
WTL 198-0063 (3,5 min)

Indicadores para
vapor



WTL198-0087

Rollos planos para
esterilizar al vapor



WTL198-0113

Bolsas para esterilizar
al vapor

TUTTNAUER, LA VENTANA ÚNICA PARA TODAS SUS NECESIDADES DE CONTROL DE INFECCIONES.

Permítanos presentarle nuestra familia complementaria de productos de esterilización, que le garantizan un proceso de esterilización exhaustivo



Limpiador ultrasónico

Este limpiador silencioso, pero muy efectivo, emplea ondas de sonido para eliminar los depósitos duros del instrumental.



Máquina de sellado

Para garantizar una esterilización efectiva, de calidad y duradera hasta que vuelva a usarse el instrumental.



Destilador de agua

Lo suficientemente pequeño para caber en una mesa. Lo suficientemente inteligente para destilar el agua para esterilizar.



Lavadora TIVA2

Lavadora desinfectadora Tiva 2
Proporciona una solución flexible lista para su uso para el lavado, la desinfección y el secado de diversos instrumentos médicos, ofreciendo un ciclo de descontaminación completo.



Lavadora TIVA8

Lavadora desinfectadora Tiva 8
Diseñada para simplificar su trabajo mediante la eliminación del lavado manual y la reducción de mano de obra.



Limpieza T-System

Tabletas de limpieza T-System; compuestas por sustancias químicas específicamente diseñadas para limpiar y eliminar el óxido de los depósitos de agua y otros sedimentos en las tuberías y la cámara de los esterilizadores a vapor.

Estándares y regulaciones

T-Top cumple los siguientes estándares internacionales

CE MDR

Número de certificado 3903015CE01, válido hasta el 01/03/2028

Compatibilidad electromagnética

IEC 61326-1

Seguridad eléctrica

IEC 61010-1, 61010-2-040

Pruebas funcionales de verificación y validación

EN 13060

Validación de *software*

EN 62304, directrices FDA

Sistema de gestión de calidad

- ◆ ISO 9001:2015
- ◆ ISO 13485:2016

Vasos a presión

PED: 2014/68/EU



Tuttnauer Ltd. se estableció como fabricante especializado en esterilizadores a nivel mundial en 1925.

Presente en más de 140 países, Tuttnauer es líder del mercado en soluciones de esterilización y control de infecciones para autoclaves en diversos sectores, como hospitales, centros de investigación, clínicas y laboratorios. Todos los autoclaves sanitarios de Tuttnauer cumplen los estándares y normativas internacionales correspondientes.

Ventas y marketing internacional

Correo electrónico:
info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.com

Tuttnauer Europe B.V.

Hoeksteen 11, 4815 PR
PO Box 7191, 4800 GD Breda
Países Bajos
Teléfono: +31 765 423 510
Fax: +31 765 423 540
Correo electrónico: info@tuttnauer.nl

Tuttnauer USA Co.

345 Oser Ave.
Hauppauge, NY 11788
Tel: +800 624 5836, +631 737 4850
Fax: +631 737 0720
Correo electrónico:
info@tuttnauerUSA.com

Distribuido por:


Tuttnauer
Innovation · Legacy · Partnership



Beneficiéese del conocimiento de
nuestros expertos

Visite nuestro blog
tuttnauer.com/blog