

Autoclave T-Top

Efficacité et fiabilité maximales

Doté du seul logiciel IoT conçu pour le cabinet médical et dentaire intelligent, il permet de connecter les appareils de stérilisation et de communiquer sur site ou à distance.



Conçu pour répondre aux besoins quotidiens de stérilisation de vos cliniques de soins de santé

Abordable et fiable pour la stérilisation des cliniques de soins de santé

Autoclave médical de table de classe B du fabricant mondial de produits haut de gamme

 Efficace

 Performance fiable

 Prêt à l'emploi

 Interface utilisateur unique

Le T-Top est un autoclave de table de 21 litres, développé spécifiquement pour les cabinets médicaux et dentaires de petite et moyenne taille. Conçu dans un souci de simplicité et d'économie, cet autoclave de table couvre les besoins fondamentaux de la stérilisation de votre clinique afin d'augmenter la productivité de votre cabinet.

Le T-Top offre la capacité universelle, qui vous est proposée, dans une solution abordable et fiable sur laquelle vous pouvez compter pour gérer la charge de travail quotidienne liée au processus de stérilisation de votre cabinet.

Le T-Top est l'équilibre parfait entre performance, ergonomie, technologie et convivialité. Il en résulte un autoclave solide et efficace qui répond parfaitement aux exigences de tous les cabinets standards.



Stérilisateur à haute performance

Solution complète pour le traitement des instruments en clinique. **Facilitez votre processus, rendez-le plus sûr et plus abordable.**

Technologie de pointe conviviale avec une connectivité Wi-Fi et des écrans tactiles couleur intuitifs.



Prêt à l'emploi

Aucune connexion d'installation spécifique n'est nécessaire, il suffit de disposer d'une source d'alimentation

- ◆ Écran tactile multicolore et convivial avec des icônes intuitives
- ◆ Démarrage et exécution simplifiées des programmes
- ◆ Compact et ergonomique, conçu pour s'adapter à votre espace



Performance fiable

Un produit de qualité qui répond à tous vos besoins et à toutes vos attentes

- ◆ Facilité de fonctionnement, d'entretien et d'utilisation
- ◆ Mémoire interne : stockage jusqu'à 500 cycles
- ◆ Technologie de pointe synonyme de longévité et de fiabilité



Sécurité et réglementation

Conforme aux normes internationales les plus strictes.



Traçabilité et connectivité

Technologie avancée qui apporte des données en temps réel

- ◆ 2 ports USB
- ◆ Connexion Wi-Fi et logiciel T-Connect
- ◆ Contrôlez les appareils à distance et téléchargez leurs données
- ◆ Accédez à distance à l'historique des cycles, recevez des notifications et des alertes.
- ◆ Les techniciens et les centres de service peuvent analyser à distance les autoclaves, diagnostiquer et résoudre les problèmes
- ◆ Documentation dématérialisée
- ◆ R.P.C.R



Innovation

La meilleure technologie de sa catégorie

- ◆ Fonctions de programmation et de personnalisation
- ◆ Interface utilisateur spécialement conçue pour accélérer et optimiser la charge de travail quotidienne
- ◆ Réglage de l'économiseur de temps pour que les tests et les cycles de stérilisation démarrent à tout moment

Conçu pour une utilisation simple

Un mélange de performances et de fonctionnalités parfaites pour **une expérience utilisateur intuitive et sans souci.**

La stérilisation en un clic de bouton

Sélectionnez simplement le programme souhaité et appuyez sur « Démarrer », une fonction click and go (rapide et simple) qui vous permet d'accélérer et d'optimiser votre charge de travail en matière de traitement de l'instrumentation.



T-Top facilite votre processus de stérilisation



Documentation et traçabilité



- ◆ Options avancées de documentation et de traçabilité, dont codes-barres
- ◆ Nom d'utilisateur et mot de passe personnalisés

Impressions pour la sauvegarde de copies papier (imprimante en option)

Capacités d'analyse sophistiquée des données grâce au logiciel RPCR

Logiciel de dématérialisation basé sur le cloud

Les appareils T-Top sont dotés de la solution exclusive et à la pointe de la technologie T-Connect, une solution IoT basée sur le cloud pour votre centre de stérilisation.

Redéfinition de votre centre de stérilisation et de vos cliniques intelligentes

T-Connect est une solution IoT basée sur le cloud conçue pour votre centre de stérilisation. Le logiciel fournit aux cabinets médicaux et dentaires des données intelligentes en temps réel, accessibles de n'importe où, à n'importe quel moment et en toute sécurité.

Connectez des autoclaves, des laveurs, etc. par Wi-Fi ou par le biais de la passerelle T-Connect et utilisez le logiciel avancé T-Connect pour améliorer l'efficacité du flux de travail et les résultats.

Profitez des avantages apportés par une documentation dématérialisée, le diagnostic des appareils et le dépannage. Le fait de savoir où et quels sont les problèmes techniques vous permet d'accélérer le service et de réduire au minimum les temps d'arrêt de votre appareil.


Pourquoi utiliser T-Connect ?

La possibilité de connecter des appareils dans votre centre de stérilisation et de communiquer sur place ou à distance.

Grâce à la solution de passerelle T-Connect, tout appareil non compatible Wi-Fi peut être connecté.



À quoi servira T-Connect ?

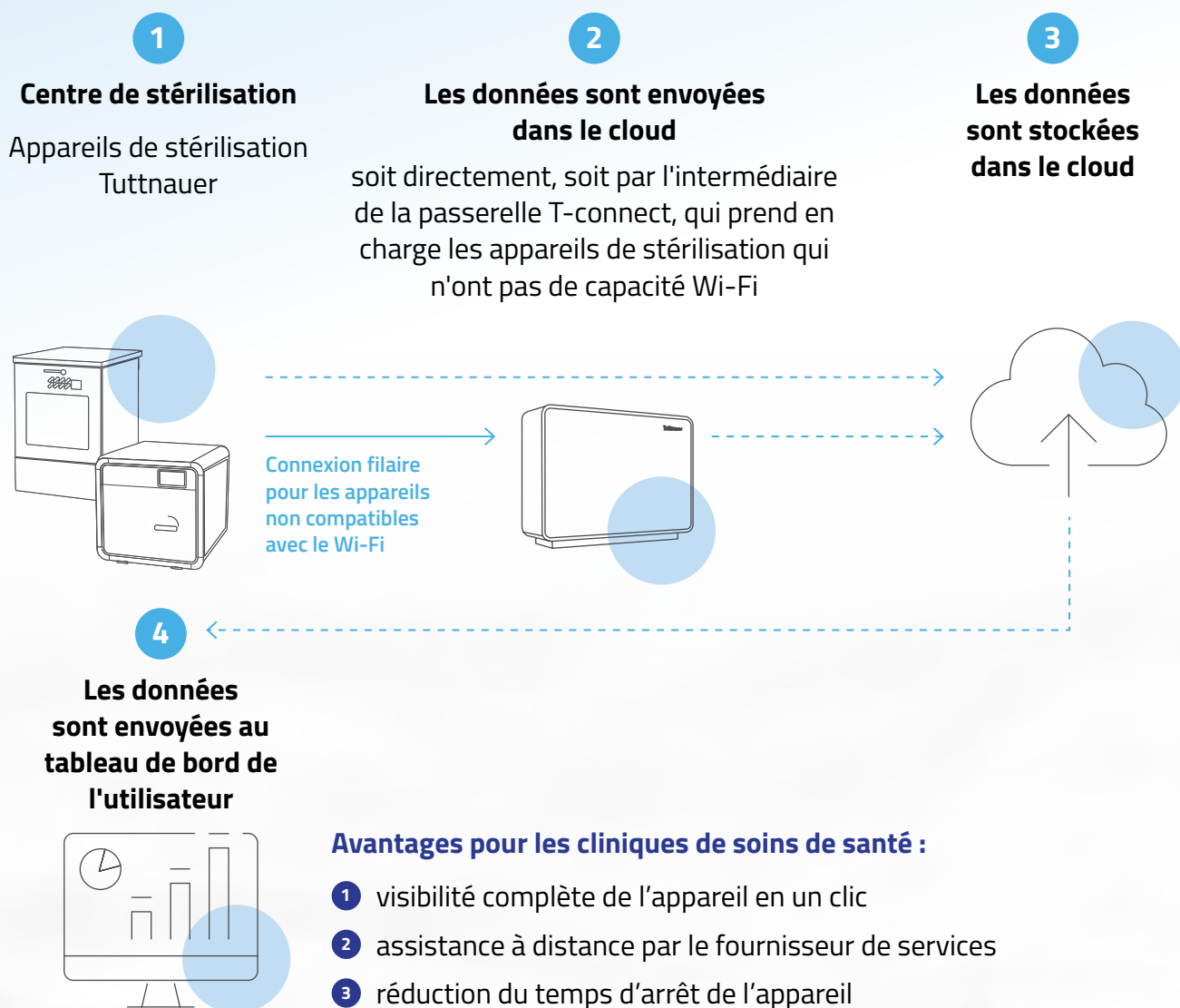






Découvrez l'avenir de la stérilisation avec T-Connect

- ◆ Connexion par PC, tablette et smart-phone
- ◆ Consultez à distance et téléchargez l'historique des cycles, recevez des notifications et des alertes
- ◆ Les techniciens et les centres de service peuvent analyser les autoclaves, établir un diagnostic et résoudre les problèmes à distance
- ◆ Suggestions sur la façon de résoudre le problème (vidéo/instructions)
- ◆ Notification automatique de réapprovisionnement de consommables et de diagnostic à distance
- ◆ Données sécurisées
- ◆ Facile à utiliser

T-Top

Programmes de cycles de stérilisation

Icône	Nom du programme	Durée de stérilisation	Type de charge	Type d'utilisation
	Non emballés 134°C	4 mins		Pour une utilisation immédiate
	Emballés 134°C	4 mins		Pour stockage
	Non emballés 121°C	20 min	Charge solide / poreuse	Pour une utilisation immédiate
	Emballés 121°C	20 min		Pour stockage
	Prion 134°C	18 min		Pour stockage
Cycles de test	Test de Bowie et Dick/Helix/ sous vide	Indicateur chimique dans un dispositif de test de produit Test périodique conforme ISO 17665-1.		

T-Top

Caractéristiques techniques

	T-Top 10"
Taille de la chambre	249 (Ø) x 450 (D) mm
Volume	21 litres
Volume utile de la chambre	75 % (~17 litres)
Dimensions générales	585 (P) x 462 (L) x 460 (H) mm
Nb max de plateaux	5
Dimensions des plateaux	375 (D) x 185 (L) x 15 (H) mm
Poids	45 Kg
Connexions	2 ports USB, Wi-Fi
Remplissage d'eau	manuel

Consommables de stérilisation et de désinfection

Tuttnauer propose une large gamme d'indicateurs pour vous aider dans votre processus de stérilisation et de désinfection. Parmi notre large gamme de produits, **nous avons l'indicateur biologique le plus rapide et le plus abordable, qui fournit une réponse en 20 minutes.**

Indicateurs biologiques



VAPEUR
WTL198-0072



VAPEUR
WTL198-0058



VAPEUR
WTL198-0067



INCUBATEUR À
FLUORESCENCE
WTL198-0057



VAPEUR
WTL198-0056



INCUBATEUR
PLZ198-0005

Lecture super rapide et ultra rapide
à fluorescence

Lecture classique en 24 heures

Indicateurs chimiques



WTL198-0053

Ruban indicateur
pour la vapeur



WTL198-0055

Indicateur pour la
vapeur



WTL198-0068

Indicateur pour la
vapeur



WTL 198-0062 (18 min)
WTL 198-0063 (3,5 min)

Indicateur pour la
vapeur



WTL198-0087

Rouleaux plats pour
la stérilisation à la
vapeur



WTL198-0113

Pochettes pour la
stérilisation à la
vapeur

TUTTNAUER, VOTRE FOURNISSEUR UNIQUE POUR TOUS VOS BESOINS DE CONTRÔLE DES INFECTIONS.

Laissez-moi vous présenter notre gamme complémentaire de produits pour un processus de stérilisation complet



Bac à ultrasons

Ce nettoyeur silencieux et extrêmement efficace utilise les ondes sonores pour débarrasser les instruments des dépôts solides.



Thermo-soudeuse

Pour une stérilisation efficace, durable et de qualité jusqu'à la ré-utilisation des instruments.



Distillateur d'eau

Suffisamment compact pour une installation sur paillasse ; suffisamment intelligent pour distiller l'eau utilisée pour la stérilisation.



Laveur TIVA2

Laveur-désinfecteur Tiva 2 Fournit une solution clé en main flexible pour le lavage, la désinfection et le séchage de divers instruments médicaux pour un cycle de décontamination complet.



Laveur TIVA8

Laveur-désinfecteur Tiva 8 Conçue pour faciliter votre travail en éliminant le lavage manuel et en réduisant votre main d'œuvre.



T- System Clean

Les comprimés T-System Clean sont composés de produits chimiques spécialement conçus pour le nettoyage et l'élimination des dépôts d'oxydes d'eau et d'autres sédiments présents dans les tuyaux et la chambre des stérilisateurs à vapeur.

Normes et réglementations

T-Top est conforme aux normes internationales suivantes

Règlement relatif aux dispositifs médicaux (MDR) de la CE

Certificat n°3903015CE01 valide jusqu'au 01/03/2028

Compatibilité électromagnétique

IEC 61326-1

Sécurité électrique

IEC 61010-1, 61010-2-040

Tests fonctionnels de vérification et de certification

EN 13060

Validation du logiciel

EN 62304, directives de la FDA

Système de gestion de la qualité

- ◆ ISO 9001:2015
- ◆ ISO 13485:2016

Équipement sous pression

PED : 2014/68/EU



Tuttnauer Ltd. est un leader mondial du secteur des stérilisateurs depuis 1925.

Présent dans plus de 140 pays, Tuttnauer est un des principaux fournisseurs de solutions de stérilisation et de contrôle des infections des autoclaves utilisés dans différents secteurs, notamment dans les établissements hospitaliers, les organismes de recherche, les cabinets médicaux et dentaires et les laboratoires. Tous les autoclaves à usage médical de Tuttnauer sont conformes aux normes et réglementations internationales applicables.

Ventes et marketing international

E-mail : info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.com

Tuttnauer Europe B.V.

Hoeksteen 11, 4815 PR
BP 7191, 4800 GD Breda
Pays-Bas
Tél : +31 765 423 510
Fax : +31 765 423 540
E-mail : info@tuttnauer.nl

Tuttnauer USA Co.

345 Oser Ave.
Hauppauge, NY 11788
Tél : +800 624 5836, +631 737 4850
Fax : +631 737 0720
E-mail : info@tuttnauerUSA.com

Distribué par :


Tuttnauer
Innovation · Legacy · Partnership



Apprenez de nos experts

Rejoignez notre blog
tuttnauerusa.com/blog