

Tuttnauer Clinic

LEADER NEL
SETTORE DELLA
STERILIZZAZIONE
DAL

1925

T-Top Autoclave

Efficienza e massima affidabilità

Dotata dell'unico software IoT progettato per le cliniche intelligenti, che collega i dispositivi di sterilizzazione e comunica in loco o in remoto.



Progettata per soddisfare le esigenze di
sterilizzazione quotidiane delle cliniche sanitarie

Conveniente e affidabile per la sterilizzazione in cliniche sanitarie

Autoclave medica da banco di classe B dal produttore leader al mondo

 Efficiente

 Prestazioni affidabili

 Plug and play

 Interfaccia utente unica

T-Top è un'autoclave da tavolo da 21 litri sviluppata appositamente per gli studi medici e dentistici di piccole e medie dimensioni. Progettata all'insegna della semplicità e della convenienza, questa autoclave da banco soddisfa le esigenze fondamentali di sterilizzazione generale di una clinica, con l'obiettivo di aumentarne la produttività.

T-Top è una soluzione economica e affidabile per gestire il carico di lavoro quotidiano dei processi di sterilizzazione dello studio.

T-Top offre il perfetto equilibrio tra prestazioni ed ergonomia, tecnologia e usabilità. Il risultato è un'autoclave di prim'ordine che soddisfa alla perfezione i requisiti di tutti gli studi medici standard.



Sterilizzatore ad alte prestazione

Soluzione completa per il ritrattamento degli strumenti clinici. **Rende il processo più facile, sicuro e conveniente.**

Tecnologia avanzata di facile utilizzo con connettività Wi-Fi e touch screen intuitivo a colori.



Plug and play

Non richiede connessioni di installazione dedicate, ma semplicemente una fonte di alimentazione

- ◆ Schermo touch screen multicolore di facile utilizzo con icone intuitive
- ◆ Avvio ed esecuzione dei programmi in tutta semplicità
- ◆ Compatta ed ergonomica, progettata per adattarsi al tuo spazio



Prestazioni affidabili

Un prodotto di qualità per fare tutto ciò che vi serve e che vi aspettate

- ◆ Facilità di funzionamento, manutenzione e utilizzo
- ◆ Memoria interna: per memorizzare fino a 500 cicli
- ◆ Tecnologia avanzata per offrire lunga durata e affidabilità



Sicurezza e regolamentazione

Soddisfa i più rigorosi standard internazionali.



Tracciabilità e connettività

Tecnologia avanzata che fornisce data intelligence in tempo reale

- ◆ Due porte USB
- ◆ Connessione Wi-Fi e software T-Connect
- ◆ Monitoraggio dei dispositivi da remoto e download dei dati del dispositivo
- ◆ Accesso da remoto alla cronologia dei cicli, notifiche e avvisi.
- ◆ I tecnici e i centri di assistenza possono analizzare a distanza le autoclavi, eseguire diagnosi e risolvere i problemi
- ◆ Documentazione senza carta
- ◆ R.P.C.R



Innovazione

La migliore tecnologia della categoria

- ◆ Funzioni di programmazione e personalizzazione
- ◆ Interfaccia utente appositamente progettata per velocizzare e ottimizzare il carico di lavoro quotidiano
- ◆ Impostazione salvatempo per impostare l'avvio dei test e dei cicli di sterilizzazione in qualsiasi momento

Progettata per la massima facilità d'uso

Un mix di prestazioni e funzionalità perfette per rendere l'esperienza dell'utente intuitiva e senza problemi.

Sterilizzazione con il clic di un pulsante


È sufficiente selezionare il programma desiderato e premere "Avvia", una funzionalità "click and go" che aiuta a velocizzare e ottimizzare il carico di lavoro per il ritrattamento degli strumenti.



T-Top semplifica il tuo processo di sterilizzazione



Documentazione e tracciabilità

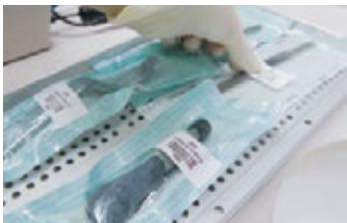

- ◆ Opzioni avanzate di documentazione e tracciabilità, compreso il codice a barre
- ◆ Nome utente e password personalizzati

Stampe per salvare le copie cartacee (stampante opzionale)

Sofisticata capacità di analisi dei dati con il software R.PCR

Software senza carta basato su cloud

I dispositivi T-Top sono dotati dell'esclusivo e tecnologicamente avanzato sistema T-Connect, una soluzione IoT basata su cloud per il tuo centro di sterilizzazione.

Ridefiniamo il tuo centro di sterilizzazione e la tua clinica intelligente

T-Connect è una soluzione IoT basata su cloud progettata per il tuo centro di sterilizzazione. Il software fornisce alle cliniche informazioni sui dati in tempo reale, accessibili da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, in modo sicuro.

È possibile collegare autoclavi, lavastrumenti e altro ancora con il Wi-Fi o il gateway T-Connect e utilizzare il software avanzato T-Connect per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro e i risultati.


Beneficia di documentazione senza l'uso di carta, diagnostica del dispositivo, monitoraggio e risoluzione dei problemi. Sapere dove e quali sono i problemi tecnici consente di accelerare il servizio, riducendo al minimo i tempi di inattività del dispositivo.

Perché usare T-Connect?

La possibilità di collegare i dispositivi della centrale di sterilizzazione e di comunicare in locale o in remoto. Utilizzando la soluzione gateway T-Connect, si collega a qualsiasi dispositivo non abilitato al Wi-Fi.



Quali sono le funzioni di T-Connect?

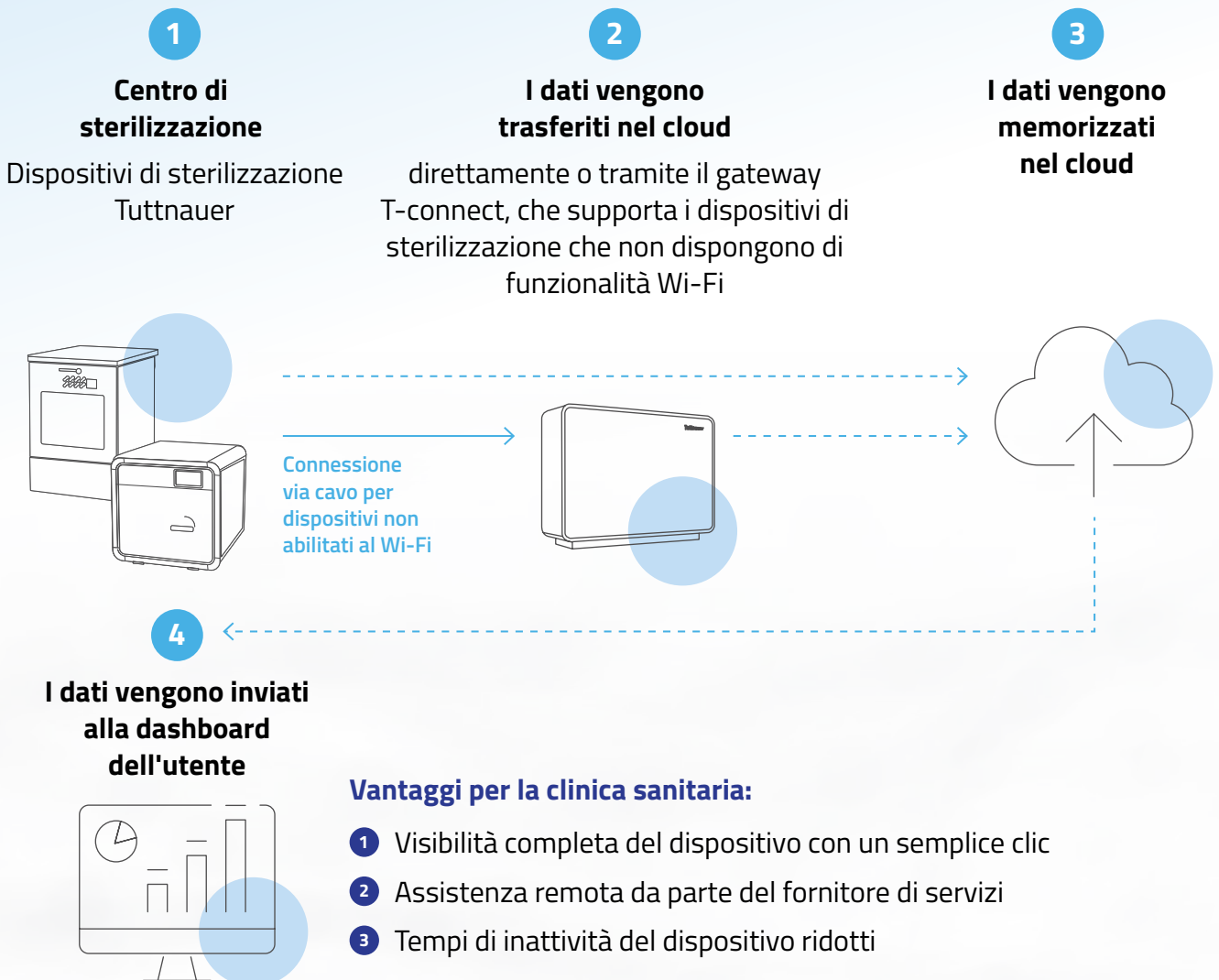






Connettiti al futuro della sterilizzazione con T-Connect

- ◆ Connettività tramite PC, tablet e smartphone
- ◆ Accesso e download da remoto alla cronologia dei cicli, notifiche e avvisi
- ◆ I tecnici e i centri di assistenza possono analizzare a distanza le autoclavi, eseguire diagnosi e risolvere i problemi
- ◆ Suggerimenti su come risolvere il problema (video/istruzioni)
- ◆ Notifica automatica di rifornimento dei materiali di consumo, diagnostica remota
- ◆ Sicurezza dei dati
- ◆ Facilità d'uso

T-Top

Programmi del ciclo di sterilizzazione

Icona	Nome del programma	Tempo di sterilizzazione	Tipo di carico	Tipo di utilizzo
	Non confezionato 134 °C	4 min		Per uso immediato
	Confezionato 134 °C	4 min		Per lo stoccaggio
	Non confezionato 121 °C	20 min	Carico solido/poroso	Per uso immediato
	Confezionato 121 °C	20 min		Per lo stoccaggio
	Prione 134 °C	18 min		Per lo stoccaggio
Cicli di prova	Test Bowie&Dick / Helix Test del Vuoto	Indicatore chimico in un dispositivo di protezione del prodotto Prove periodiche di cui alla norma ISO 17665-1		

T-Top

Specifiche tecniche

T-Top 10"	
Dimensioni camera	249 (Ø) x 450 (P) mm
Volume	21 L
Spazio utile della camera	75% (~17 L)
Dimensioni complessive	585 (P) x 462 (L) x 460 (A) mm
N. max di vassoi	5
Dimensioni vassoio	375 (P) x 185 (L) x 15 (A) mm
Peso	45 kg
Collegamenti	2 porte USB, Wi-Fi
Riempimento acqua	manuale

Sterilizzazione e disinfezione dei materiali di consumo

Tuttnauer offre un'ampia gamma di indicatori per supportare il tuo processo di sterilizzazione e disinfezione. All'interno della nostra vasta gamma di prodotti, **potete trovare l'indicatore biologico più veloce e conveniente, in grado di fornire una risposta entro 20 minuti.**

Indicatori biologici



VAPORE
WTL198-0072



VAPORE
WTL198-0058



VAPORE
WTL198-0067



INCUBATORE A
FLUORESCENZA
WTL198-0057



VAPORE
WTL198-0056



INCUBATORE
PLZ198-0005

Letture della fluorescenza eccezionale e ultra rapida

Letture convenzionale in
24 ore

Indicatori chimici



WTL198-0053

Nastro indicatore
per il vapore



WTL198-0055

Indicatore per il
vapore



WTL198-0068

Indicatore per il
vapore



WTL 198-0062 (18 min)
WTL 198-0063 (3,5 min)

Indicatori per il vapore



WTL198-0087

Rotoli piatti per la
sterilizzazione a
vapore



WTL198-0113

Buste per la
sterilizzazione a
vapore

TUTTNAUER, IL TUO NEGOZIO UNICO PER TUTTE LE TUE ESIGENZE DI CONTROLLO DELLE INFEZIONI.

Lascia che ti presenti la nostra famiglia complementare di prodotti di sterilizzazione per garantire un processo di sterilizzazione completo



Dispositivo di pulizia a ultrasuoni

Questo pulitore silenzioso ma molto efficace utilizza onde sonore per liberare gli strumenti dai depositi duri.



Macchina sigillatrice

Per assicurare una sterilizzazione di qualità efficace e duratura fino al riutilizzo degli strumenti.



Distillatore d'acqua

Abbastanza piccolo da stare su un bancone; abbastanza intelligente da distillare l'acqua per la sterilizzazione.



Lavastrumenti / Termodisinfettore TIVA2

Lavastrumenti Tiva 2
Fornisce una soluzione flessibile e chiavi in mano per il lavaggio, la disinfezione e l'asciugatura di vari strumenti medici, per un ciclo di decontaminazione completo.



Lavastrumenti / Termodisinfettore TIVA8

Lavastrumenti Tiva 8
Progettato per semplificare il lavoro eliminando il lavaggio manuale e riducendo la forza lavoro.



T- System Clean

Le compresse T-System Clean sono composte da sostanze chimiche appositamente studiate per la pulizia e la rimozione degli ossidi di deposito dell'acqua e di altri sedimenti presenti nelle tubature e nella camera degli sterilizzatori a vapore.

Standard e direttive

T-Top soddisfa i seguenti standard internazionali

CE MDR

Certificato numero 3903015CE01 valido fino al 01-03-2028

Compatibilità elettromagnetica

IEC 61326-1

Sicurezza elettrica

IEC 61010-1, 61010-2-040

Test funzionali di verifica e convalida

EN 13060

Convalida del software

EN 62304, guida FDA

Sistema di gestione della qualità

- ◆ ISO 9001:2015
- ◆ ISO 13485:2016

Contenitore a pressione

PED: 2014/68/UE



Tuttnauer Ltd. è una società produttrice di livello mondiale specializzata in sterilizzatori dal 1925.

Con una presenza in oltre 140 paesi, Tuttnauer è leader di mercato nella fornitura di soluzioni di sterilizzazione e controllo delle infezioni per autoclavi in vari settori, come ospedali, istituti di ricerca, cliniche e laboratori. Tutte le autoclavi mediche Tuttnauer sono conformi agli standard e alle normative internazionali in materia.

Vendite internazionali e marketing

E-mail: info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.com

Tuttnauer Europe B.V.

Hoeksteen 11, 4815 PR
PO Box 7191, 4800 GD Breda
Paesi Bassi
Tel.: +31 765 423 510
Fax: +31 765 423 540
E-mail: info@tuttnauer.nl

Tuttnauer USA Co.

345 Oser Ave.
Hauppauge, NY 11788
Tel.: +800 624 5836, +631 737 4850
Fax: +631 737 0720
E-mail: info@tuttnauerUSA.com

Distribuito da:


Tuttnauer
Innovation · Legacy · Partnership



Imparate dai nostri esperti

Iscriviti al nostro blog
tuttnauerusa.com/blog