

Tuttnauer Dental

Aportando **90 AÑOS de Profesionalismo** a su clínica

TIVA2 | TIVA2-H

LÍNEA Tiva



Descubra la lavadora- desinfectadora TIVA2

Diseñada para simplificar
su trabajo y garantizar la
seguridad de sus pacientes
y de sus empleados.

La lavadora-desinfectadora totalmente
automática para clínicas dentarias y
laboratorios en cualquier lugar

TIVA2



Lavadora de sobremesa

Capacidad de la cámara: 65 litros

Dimensiones (AxPxH):

595 x 520 x 600 mm

23,4" x 20,4" x 23,6"

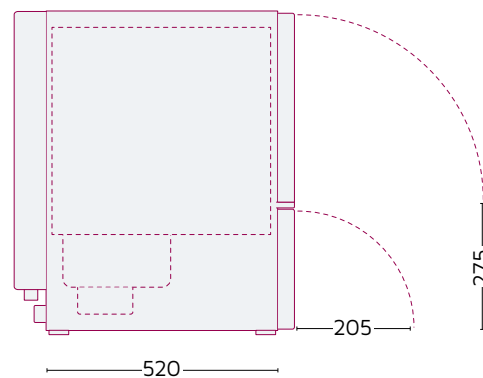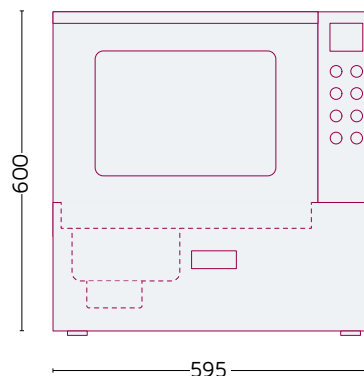

¡Observe y monitoree el proceso de lavado y desinfección a través de nuestras puertas de vidrio!

Operación y monitoreo sencillos

- Diseño inteligente y eficiente
- Fácil de utilizar
- Transferencia de datos a través de USB y R232
- Dos sensores de temperatura PT100
- Conexión eléctrica estándar
- Práctica impresora complementaria
- Operada por medio de un teclado táctil y una interfaz de pantalla gráfica LCD de 3,5"

Resultados excelentes

- Tres programas de funcionamiento predefinidos
- Puede elegir entre 37 programas personalizables
- Secado total utilizando un soplador dedicado
- Condensador de vapor integrado
- Indicación en tiempo real del nivel y de la calidad del agua

TIVA2-H



Lavadora de mesa bajo el mostrador

Capacidad de la cámara: 65 litros

Dimensiones (AxPxH):

595 x 520 x 818 mm

23,4" x 20,4" x 32,2"

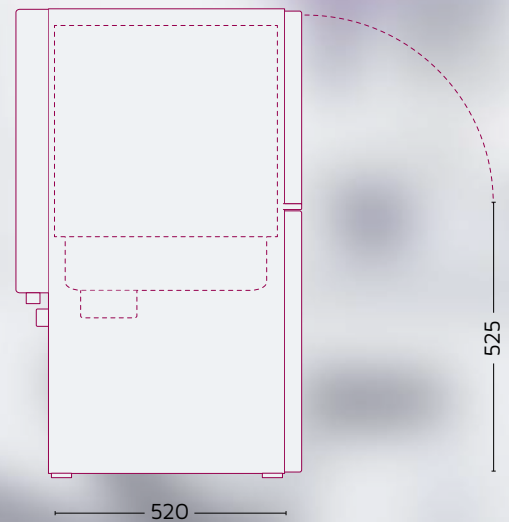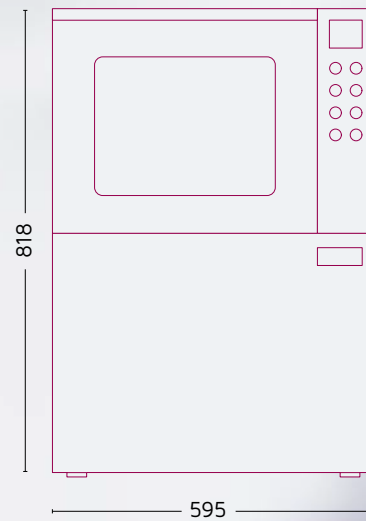

Funcionamiento fiable

- Robusta cámara de acero inoxidable de 316L
- Puertas de vidrio durables y transparentes
- Calentadores de 0,9 kW para un secado total
- Sistema avanzado de ablandamiento del agua
- Eficiencia energética y de costes

Fácil de limpiar y de mantener

- La única lavadora con un sistema de vaciado total del agua (ETS)
- Brazos de pulverizado de fácil remoción y lavado
- Componentes de larga duración que necesitan un servicio mínimo

Características técnicas

○ estándar + opcional / no disponible

CARACTERÍSTICAS	TIVA2	TIVA2-H
Lab. externo Certificado para validación de la Prueba de tipo de acuerdo con las Normas EN ISO 15883-1/2	○	○
Sistema de tubería certificado por DVGW, diseñado para aislar el sistema de tuberías de agua potable (paso de agua) según lo prescrito por la norma europea EN 1717	○	○
Puerta manual con bloqueo	○	○
Cámara de la lavadora fabricada en acero inoxidable de alta calidad, AISI 316L	○	○
Interfaz SECUNDARIA USB para ordenador	○	○
Interfaz HOST USB para UNIDAD FLASH	○	○
Interfaz RS232 para documentación externa de ciclos	○	○
Interfaz paralela para impresora	○	○
Panel táctil con pantalla gráfica de colores	○	○
Caudal de la bomba de agua de la cámara	100 litros/minuto	100 litros/minuto
Caudal: ventilador de secado de 30 W con filtro HEPA (H14).	40 m ³ /h	40 m ³ /h
Potencia absorbida	2,9 kW	2,9 kW
Bombas de dosificación para detergentes con medidores de caudal y sensores de nivel: estándar - 1, opcional - hasta 2 con TIVA2 y hasta 2 con TIVA2-H	1/2	1/2/3
Medición de conductividad del agua	+	+
Impresora externa para documentación de procesos	+	+
Luz LED de la cámara de alta luminosidad	+	+
Conexión de agua desmineralizada/caliente	+	+
Depósito(s) interno(s) de detergente	0,6 litros	5 litros

Principales configuraciones de las canastas y entradas

Capacidad para el ciclo de lavado:

Con piezas de mano - hasta 8 casetes pequeños o medios o hasta 3 casetes grandes.

Sin piezas de mano - hasta 16 casetes pequeños o medios o hasta 6 casetes grandes.



CONFIGURACIÓN 1

- Canasta de lavado estándar
- Canasta vertical para espejos e instrumentos
- 2 x Encaje para 3 casetes grandes
- Canasta de red para artículos pequeños



CONFIGURACIÓN 2

- Canasta de lavado + Soporte para 8 piezas de mano
- Canasta vertical para espejos e instrumentos
- Encaje para 8 bandejas o 8 casetes



CONFIGURACIÓN 3

- Canasta de lavado estándar
- 2 x Encajes para 8 bandejas o 8 casetes



CONFIGURACIÓN 4

- Canasta de lavado + Soporte para 8 piezas de mano
- Canasta vertical para espejos e instrumentos
- Encaje para 3 casetes grandes
- Canasta de red para artículos pequeños

Tuttnauer, los líderes mundiales de renombre en soluciones de control de infecciones con más de

90 años de experiencia

Productos distribuidos a clínicas, hospitales e instituciones de investigación en más de

140 países

TUTTNAUER, SU VENTANILLA ÚNICA PARA TODAS SUS NECESIDADES DE CONTROL DE INFECCIONES.

Le presentamos nuestra familia complementaria de productos de procesamiento estéril para garantizar un proceso total del principio al final.



Máquina de sellado



T-duke



Destilador de agua



Limpiador ultrasónico



Nivel de desafío - muy alto
WTL198-0062



Ventas y marketing internacional
Correo electrónico: info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.com

Tuttnauer Europe b.v.
Hoeksteen 11, 4815 PR
PO Box 7191, 4800 GD Breda
Países Bajos
Teléfono: +31 765 423 510
Fax: +31 765 423 540
Correo electrónico: info@tuttnauer.nl

Tuttnauer USA Co.
25 Power Drive,
Hauppauge, NY 11788
Tel: +800 624 5836, +631 737 4850
Fax: +631 737 0720
Correo electrónico: info@tuttnauerUSA.com

Distribuido por:



Beneficiense del conocimiento de nuestros expertos

Únase a nuestro blog tuttnauer.com/blog

